



medifa 5000

Tables d'opération
mobiles



we care.

- Modèles manuels et électroniques
- Versions bases (600 mm)
- Avec ou sans translation longitudinale
- Avec matelas en mousse visco-élastique ou mousse de polyuréthane
- Possibilités de nettoyage et de désinfection optimales
- Facilement manoeuvrable
- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles
- Concept de fonctionnement sophistiqué
- Multiples possibilités d'utilisation et de positions du patient
- Idéale pour les applications d'imagerie et pour l'utilisation d'amplificateur de brillance
- Vaste gamme d'accessoires pour toutes les disciplines chirurgicales
- Capacité de charge jusqu'à 250 kg (550 lbs)





Table d'opération manuelle

Réf. 501130

- Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 750 à 1000 mm
- Réglage en proclive / en déclive, assisté par vérin pneumatique, de -30° à +30°
- Réglage latéral par manivelle amovible, jusqu'à 20° des deux côtés
- Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
- Possibilité de position flex / reflex
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Matelas en polyuréthane (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastiques (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible*
- Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 125 mm avec blocage central

Autres modèles manuels:

Réf. 501135

En plus avec translation longitudinale manuelle jusqu'à 310 mm

Réf. 503220

Avec activation de fonctions mains libres par vérin pneumatique

Réf. 503225

Avec activation de fonctions mains libres par vérin pneumatique et avec translation longitudinale manuelle jusqu'à 310 mm

Recommandation de configuration

Réf. 501130

Table d'opération manuelle

Réf. 61144

Repose-tête

Réf. 61655

Billot mécanique

Réf. 61615

Plaques jambières divisées

Réf. 61220

Appui-bras

Prix sur demande!

Specialités

- Ambulatoire
- Chirurgie générale

Toutes les versions de medifa 5000 peuvent être équipées de nombreux accessoires en option !



Table d'opération électromécanique

Réf. 504220

- Réglage électromécanique de la hauteur de 780 à 1080 mm
- Réglage électromécanique en proclive / en déclive, de -30° à +25°
- Réglage latéral électromécanique, 20° des deux côtés
- Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
- Possibilité de position flex / reflex
- Mise à zéro automatique
- Télécommande filaire avec écran couleur et indication du niveau de charge de la batterie pour les fonctions électriques
- Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Matelas en polyuréthane (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastiques (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible*
- Mobilité assurée par quatre roulettes doubles ø 125 mm avec blocage central
- Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur



Autres modèles électriques avec hauteur standard:

Réf. 504225

En plus avec translation longitudinale électromécanique du plateau jusqu'à 285 mm

Réf. 504320

En plus avec réglage électromécanique du dossier

Réf. 504325

En plus avec réglage électromécanique du dossier et translation longitudinale du plateau jusqu'à 285 mm



- Toutes les variantes électromécaniques sont disponibles avec hauteur basse de 600 mm
- Au choix réglage du dossier manuel ou électrique
- Illustration des configurations possibles en pages 12 et 13

Recommandation de configuration

Réf. 504220

Table d'opération électromécanique

Réf. 61144

Repose-tête

Réf. 61655

Billot mécanique

Réf. 61615

Plaques jambières divisées

Réf. 61220

Appui-bras

Prix sur demande!

Specialités


- Ambulatoire
- Chirurgie générale

Concept de manipulation



- Ecran couleur
- Versions pouvant adopter jusqu'à trois positions d'utilisation
- Capable de mémoriser jusqu'à trois positions d'utilisation
- Mode inversé
- Touches pour les réglages
- Touche d'arrêt d'urgence
- Bouton marche/arrêt
- Position zéro (réglages simultanés)


1. Standard: Télécommande manuelle avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries
2. Standard: Commande supplémentaire intégrée au pilier pour des fonctions électriques
3. En option: Télécommande manuelle infrarouge (sans câble) avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries (réf. 604070)
4. En option: Commande à pédale pour les fonctions basiques hauteur, proclive /déclive, inclinaison latérale (réf. 604060)

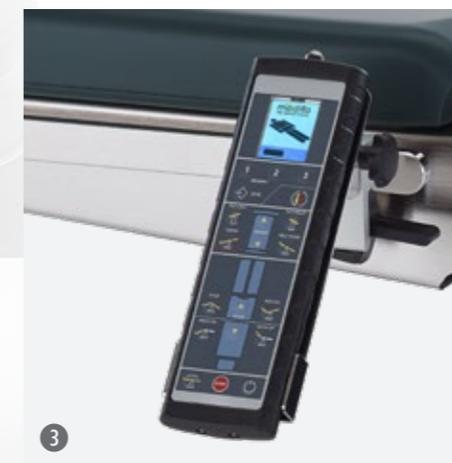

Fonctionnalité et confort



- Fonctionnement simple et rapide
- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles

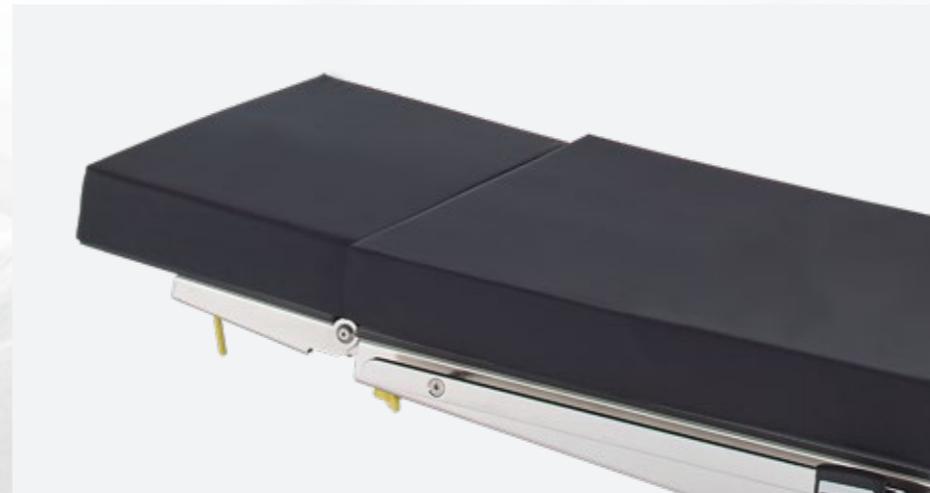

- Matelas viscoélastiques en 3 couches
- Épaisseur: 80 mm
- Amovibles
- Antistatique



- Maniabilité élevée grâce aux roulettes doubles
- Liberté optimale des pieds assurée par une conception de construction spéciale du socle



- Matelas ergonomiques en polyuréthane*
- Épaisseur: 60 mm
- Amovibles
- Antistatique

*A partir de 2019, les tables d'opération de la gamme medifa 5000 seront livrées avec des coussins noirs en polyuréthane.




		Manuel			
	Plage de réglage	501130	501135	503220	503225
	Réglage de la hauteur	750 - 1000 mm	○	○	○
	Réglage de la hauteur	780 - 1080 mm			
	Réglage de la hauteur	600 - 950 mm			
	Réglage en proclive/déclive	-30° / +30°	■	■	○
	Réglage en proclive/déclive	-30° / +25°			
	Réglage latéral	-20° / +20°	■	■	○
	Réglage du dossier	-40° / +70°	■	■	○
	Plateau à translation	310 mm		■	■
	Plateau à translation	285 mm			
	Mise à zéro				
	Position flex / reflex	■	■	○	○
	Frein central	■	■	■	■
	Billot	◆	◆	◆	◆
	5e roue	◆	◆	◆	◆
	Memoires (3 positions)				
	Capacité de charge	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

		Électrique			
		504220	504225	504320	504325
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	●	●
		●	●	●	●
		■●	■●	●	●
		■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆
		◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●
		200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

		Électrique et basses			
		505220	505225	505320	505325
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		●	●	●	●
		■	■	●	●
		●	●	●	●
		■●	■●	●	●
		■	■	■	■
		◆	◆	◆	◆
		●	●	●	●
		200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

● Électrique ○ Commande sans mains ■ Manuel ◆ En option

Caractéristiques techniques






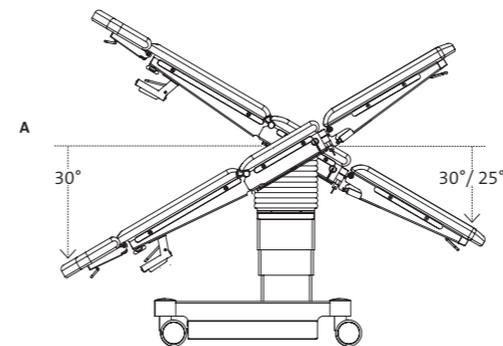
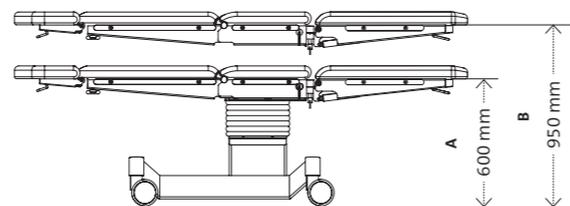
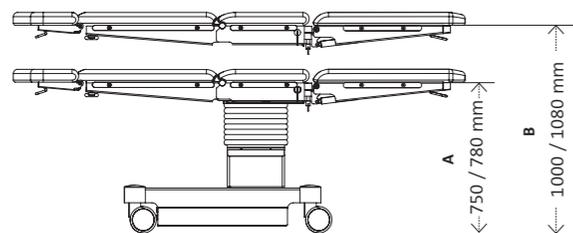


Modèles	Plage de réglage	
	Hauteur A	Hauteur B
501130 / 501135 / 503220 / 503225	750 mm	1000 mm
504220 / 504225 / 504320 / 504325	780 mm	1080 mm


Modèles	Plage de réglage	
	Hauteur A	Hauteur B
505220 / 505225 / 505320 / 505325	600 mm	950 mm

Modèles	Plage de réglage	
	A	B
501130 / 501135 / 503220 / 503225	30°	30°
504220 / 504225 / 504320 / 504325	30°	25°
505220 / 505225 / 505320 / 505325	30°	25°


Modèles	Imagerie per-opératoire
501135 / 503225	
504225 / 504325 505225 / 505325	

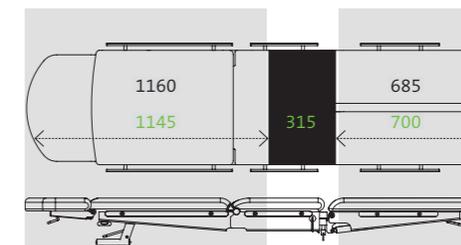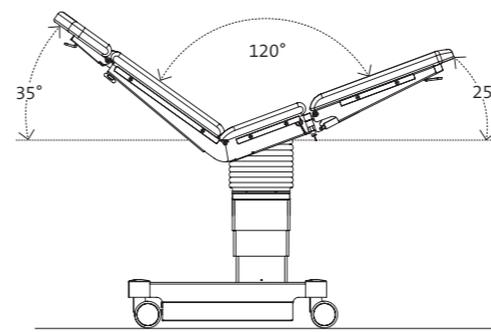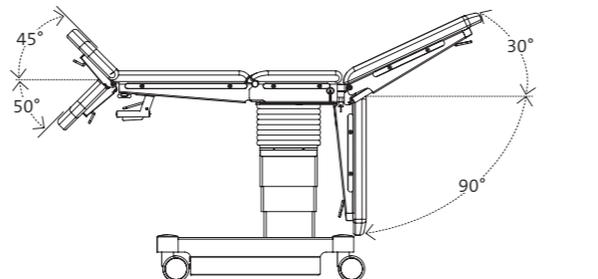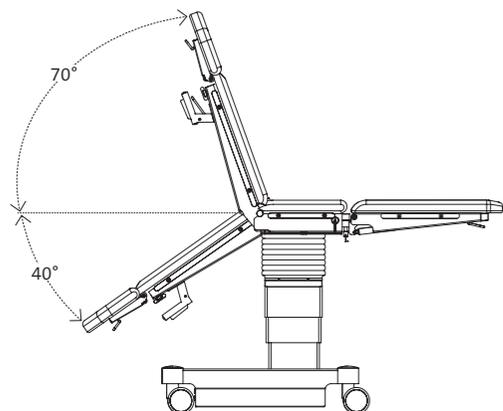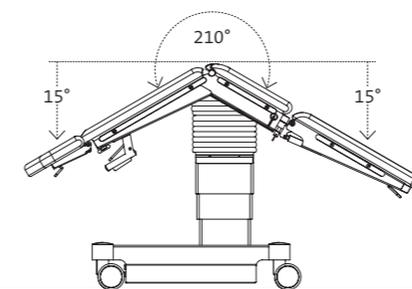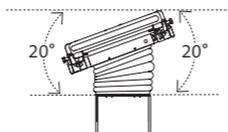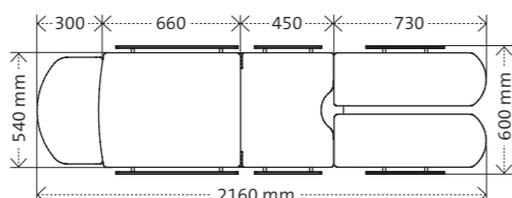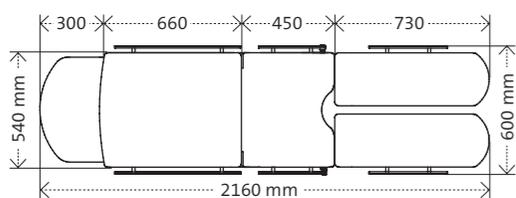


Plateau à translation (à gauche)

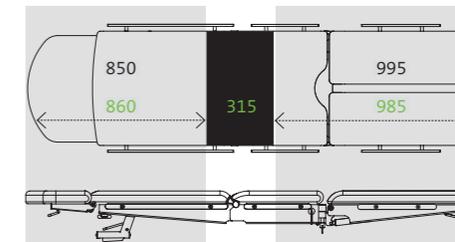

Plateau à translation (à droite)

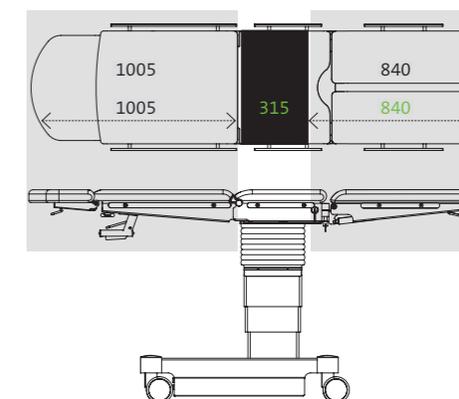

Mise à zéro

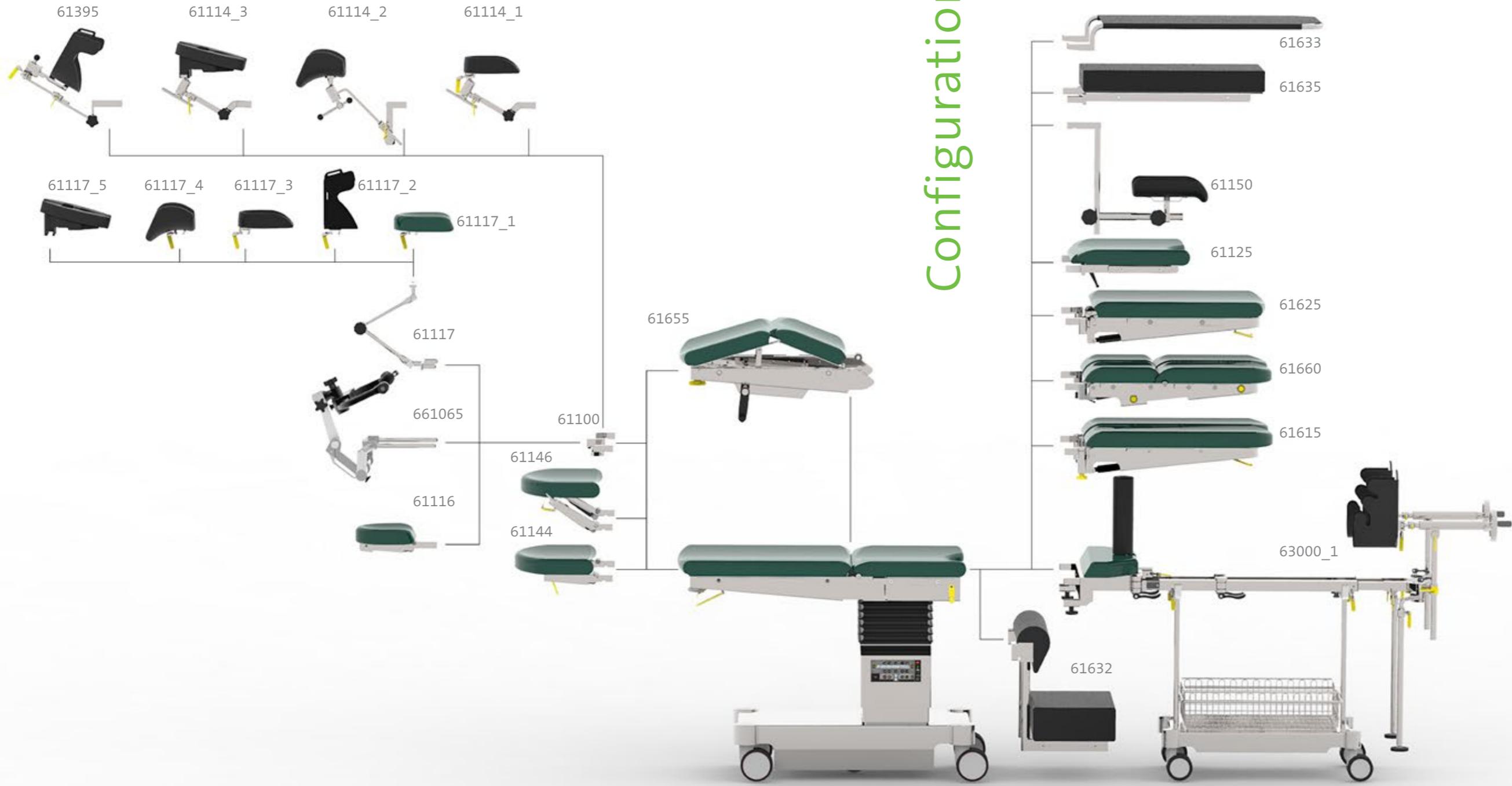

Configuration

Accessoires pour medifa 5000



Repose-tête pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61144

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61144SF)



Repose-tête con double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61146

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61146SF)



Repose-tête petit pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61143


- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 230 x 230 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61143SF)



Billot mécanique pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61655

- Réglable par manivelle
- Pas de montage ultérieur
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent

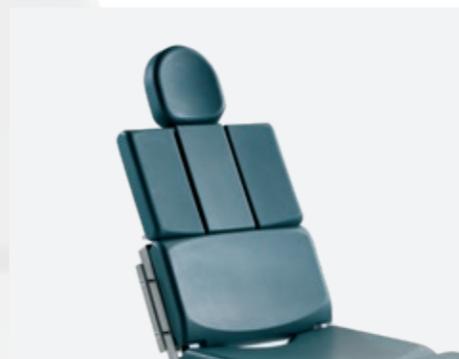

Dossier en trois parties pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61385

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- À monter sur la section pelvienne
- Réglage simple par vérin à gaz
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61385SF)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61125

- Rallonge de la section pelvienne de 430 mm
- Avec échancrure gynécologique
- L x l: 430 x 540 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61125SF)

Accessoires pour medifa 5000



Plaque jambière pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61625

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à $+30^\circ$
- Adaptable à la section pelvienne
- L x l: 670 x 540 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61625SF)



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61615

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à $+30^\circ$, écartables par 180°
- A monter sur la section pelvienne
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61615SF)
- Paire



Plaques jambières divisées à double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61660

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à $+30^\circ$, écartables par 180° , rabattables
- A monter sur la section pelvienne
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61660SF)
- Paire



Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61690

- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à la plaque de siège ou au dossier inférieur
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm, amovible, antistatique



Plateau de jambes pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61635

- De transfert pour un soutien de courte durée des jambes
- A monter sur la section pelvienne
- L x l: 900 x 500 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Plateau pour la chirurgie pédiatrique pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61633

- A monter sur la section pelvienne
- Matelas amovible
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 700 x 430 mm
- Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm, antistatique, amovible

Accessoires pour medifa 5000



Elargisseur pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61355

- Éléments pour élargir le plateau
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 310 x 105 mm par segment
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61355SF)
- Paire



Commande au pied pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble
- Pas de montage a posteriori



Telecommande manuelle infra rouge pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604070

- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec chargeur



5ième roue

Réf. 50645

- Pour stabilisation directionnelle et maniabilité de la table
- Pas de montage a posteriori
- Adaptable à: Pour tous les modèles de la gamme 5000, sauf 505220, 505225, 505320 et 505325



Barre de stabilité transversale radiotransparente pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61670

- Remplace la barre métallique assurant une radiographie de la partie dorsale sans restrictions



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61640

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américaine)
- Matériel: Acier inoxydable



Set d'irrigation RTU pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61120

- Se composant d'un seau, une cuvette, crépine, tuyau et chariot en inox
- Fixation incluse
- L x B x H (Cuvette): 325 x 265 x 65 mm
- Volume (Seau): 15 Liter
- Matériel: Acier inoxydable



Coussin en mousse pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 5000SF

- Matelas optionnel (remplace le matelas vert)
- Pour des tables ayant un dossier en une partie
- H = 80 mm



Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (ref. 341045) en acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Vous trouverez d'autres accessoires dans notre brochure "Accessoires pour tables d'opération".



medifa

L'acteur mondial en matière de salle d'opération

medifa healthcare group rassemble sous un même toit toutes les compétences en matière de salle d'opération - 100 % made in Germany.

Avec sa gamme de produits et de prestations, le groupe couvre tous les besoins en matière de tables et d'accessoires d'opération, des tables d'examen au système de murs, de portes et de plafonds pour fournir une salle d'opération clé en main.

Ce groupe rassemble les fabricants de composants de table d'opération les plus importants du monde.


La planification, l'ingénierie et la fabrication sont entièrement effectuées en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus de 90 % rend le groupe pratiquement indépendant des fournisseurs tiers.

Dans ce groupe, nous retrouvons medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop (tables d'opération), medifa hygienic rooms GmbH à Ötigheim (systèmes d'aménagement modulaire) et medifa metall und medizintechnik GmbH (composants de table d'opération) à Rastatt.

Via un réseau de partenaires, medifa exporte dans plus de 80 pays à travers le monde.

Sites et pays d'exportation

- Systèmes de salles d'opération modulaires : Plafonds, portes, murs (RooSy)
- Tables d'opération mobiles et accessoires
- Tables d'examen et de traitement
- Solutions de construction spéciales

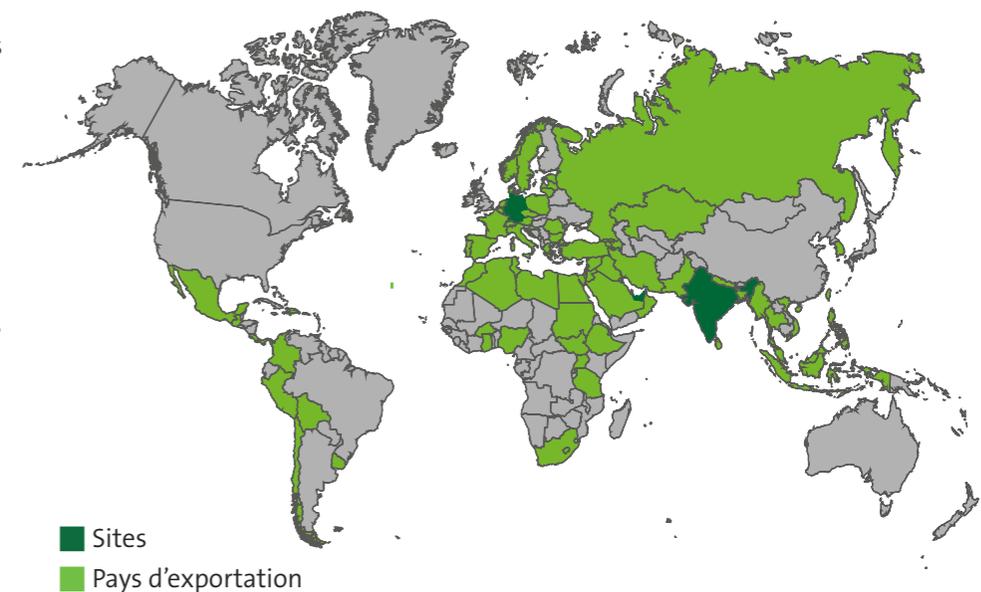



SYSTEM MED

Parc Urbain Est
105, rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx en Velin
tel. 04 78 89 71 43
fax 04 78 89 65 40
info@system-med.fr



DIN EN ISO 13485:2012
DIN EN ISO 9001:2015

Version 02-18-FR
Sous réserves de modifications.

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care.