



medifa 6000

Tables d'opération
mobiles



we care.

medifa 6000

- Fonctions électrohydrauliques
- Commande manuelle supplémentaire offrant un réglage des fonctions électro-hydrauliques à tout moment (option)
- Avec ou sans translation longitudinale
- Avec matelas en mousse visco-élastique ou mousse de polyuréthane
- Possibilités optimales de nettoyage et de désinfection
- Facilement maniable
- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles
- Concept de fonctionnement sophistiqué
- Multiples possibilités d'utilisation et de positions du patient
- Idéale pour les applications d'imagerie et pour l'utilisation d'amplificateur de brillance
- Vaste gamme d'accessoires pour toutes les disciplines chirurgicales
- Capacité de jusqu'à 454 kg



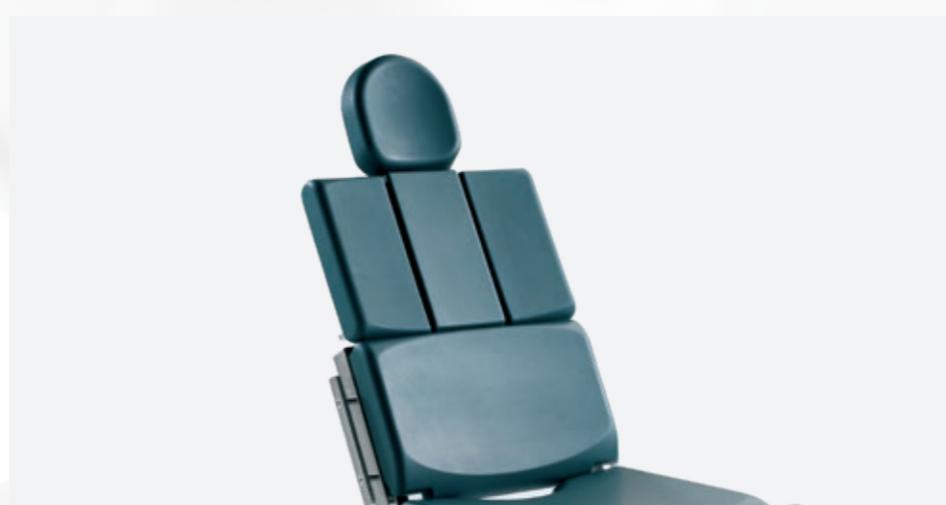


Table d'opération électrohydraulique

Réf. 601700

- Réglage de la hauteur de 690 à 1050 mm
- Réglage en proclive / en déclive de -30° à +30°
- Réglage latéral jusqu'à 20°
- Réglage de la partie inférieure du dossier de -40° à +70°
- Réglage de la partie supérieure du dossier de -35° à +50°
- Position flex / reflex
- Mise à zéro automatique
- Possibilité de positionner le patient en position reverse
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Mobilité avec frein central
- Possibilité d'ajouter une 5e roue
- Matelas en polyuréthane (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastiques (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible*
- Capacité de 454 kg (1,000 lbs)

Autres modèles:

Réf. 601820

En plus avec translation longitudinale du plateau jusqu'à 285 mm

Réf. 601120

En plus avec dossier d'une partie et translation longitudinale du plateau jusqu'à 285 mm

Recommandation de configuration

Réf. 601120

Table d'opération électrohydraulique

Réf. 61144

Repose-tête

Réf. 61250

Dossier supérieur

Réf. 61615

Plaques jambières divisées

Réf. 61220

Appui-bras

Prix sur demande!

Specialités

- Chirurgie générale
- Orthopédie
- Gynécologie
- Urologie
- Chirurgie oto-rhino-laryngologique

- Cette Variante est disponible avec billot manuel (option)
- Toutes les versions du medifa 6000 peuvent être équipés de nombreux accessoires en option

Concept de manipulation



- Ecran couleur
- Touches de commandes et de navigation
- Mode inversé
- Mécanisme de blocage
- Touches pour les réglages
- Bouton marche/arrêt
- Touche d'arrêt d'urgence
- Position zéro


1. Standard: Télécommande manuelle avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries (en option: télécommande manuelle infrarouge sans câble, réf. 604070)
2. Standard: Commande supplémentaire intégrée au pilier pour des fonctions électriques
3. En option: Commande à pédale pour les fonctions basiques hauteur, proclive /déclive, inclinaison latérale (réf. 604060)
4. En option: Commande manuelle supplémentaire offrant un réglage des fonctions électro-hydrauliques à tout moment



Fonctionnalité et confort



- Fonctionnement simple et rapide
- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles

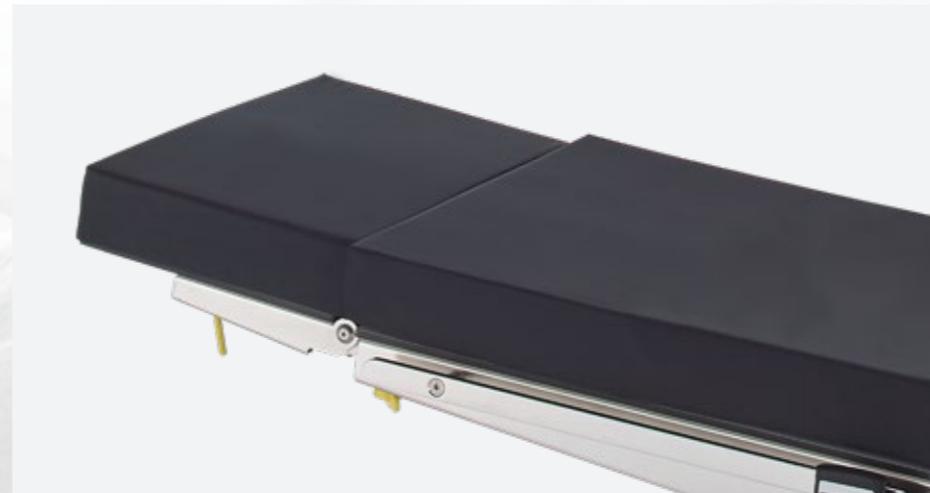

- Matelas viscoélastiques en 3 couches
- Épaisseur: 80 mm
- Amovibles
- Antistatique



- Maniabilité élevée grâce aux roulettes doubles
- Liberté optimale des pieds assurée par une conception de construction spéciale du socle



- Matelas ergonomiques en polyuréthane*
- Épaisseur: 60 mm
- Amovibles
- Antistatique

*A partir de 2019, les tables d'opération de la gamme medifa 6000 seront livrées avec des coussins noirs en polyurethane.



	Plage de réglage	601120	601700	601820
Réglage de la hauteur	690 - 1050 mm	●	●	●
Réglage en proclive / déclive	-30° / +30°	●	●	●
Réglage latéral	-20° / +20°	●	●	●
Réglage du dossier (partie inférieure)	-40° / +70°	●	●	●
Partie supérieure du dossier	-35° / +50°		●	●
Position flex / reflex		●	●	●
Plateau de table à translation	285 mm	●		●
Ajout de 5e roue		●	■	■
Mise à zéro automatique		●	●	●
Frein central		●	●	●
Billot		◆	●	●
Commande manuelle auxiliaire		◆	◆	◆
Vérin stabilisateur sur le socle		◆	◆	◆
Capacité de		454 kg	454 kg	454 kg

● Électro-hydraulique ■ Manuel ◆ En option



Positionnement du patient en inversé mode



Positionnement du patient en position flex pour chirurgie thoracique et rénale



Positionnement du patient pour chirurgie de la vésicule biliaire



Positionnement du patient pour la chirurgie du struma

Positionnements



Positionnement du patient pour les interventions gynécologiques avec appui-jambes



Positionnement du patient pour les interventions urologiques avec appui-jambes et jeu d'irrigation RTU



Positionnement du patient pour neurochirurgie avec serre-crâne



Positionnement du patient pour orthopédie avec dispositif d'extension



Positionnement du patient pour les interventions proctologiques avec support de genou et coussin matelassé



Positionnement du patient pour neurochirurgie avec calotte de tête




Positionnement du patient pour orthopédie avec dispositif d'extension




Positionnement du patient pour orthopédie avec dispositif d'extension du bras, fixe-doigts de Weinberger et Appui-bras


Caractéristiques techniques

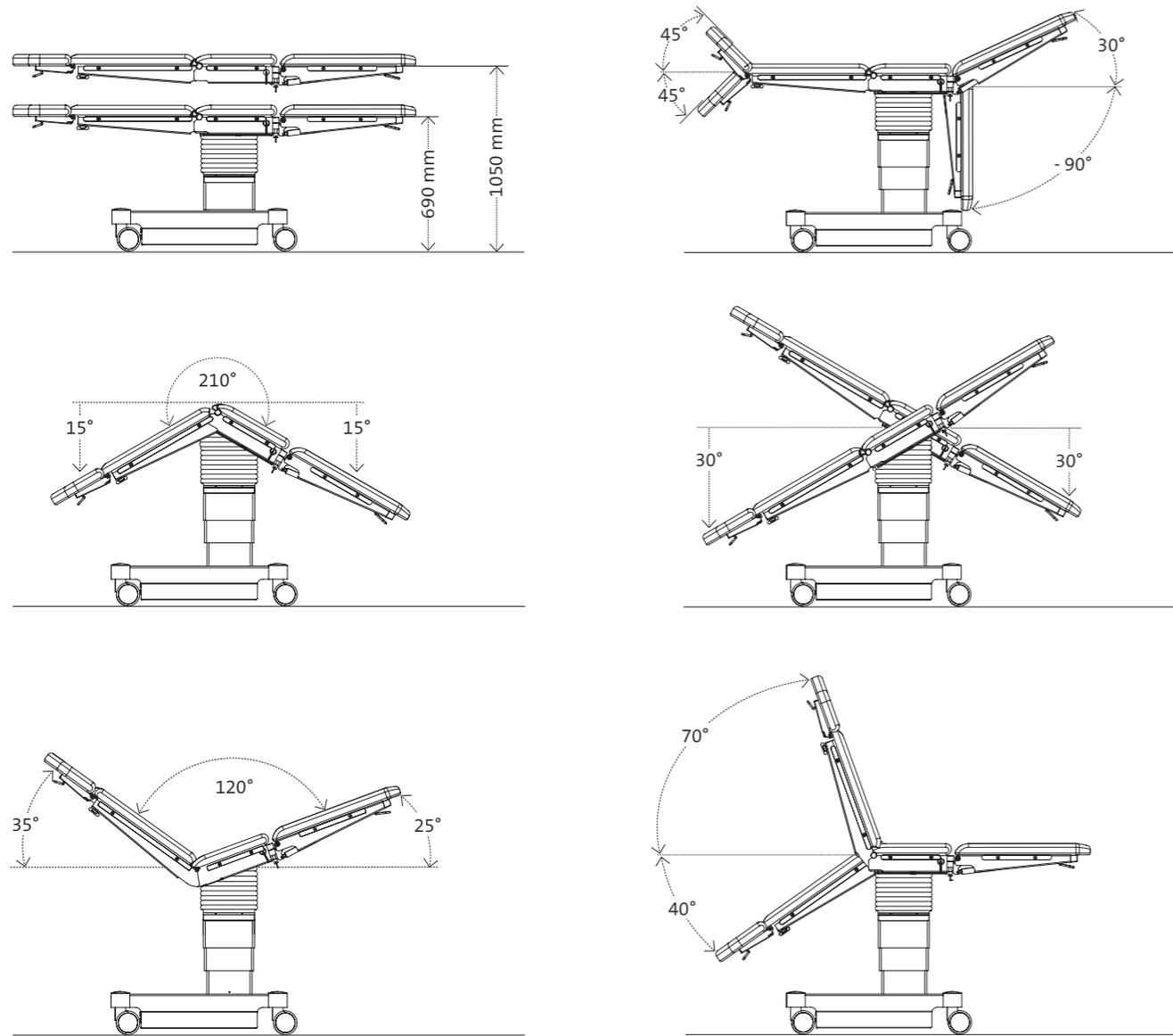


Seulement pour modèles 601700 / 601820

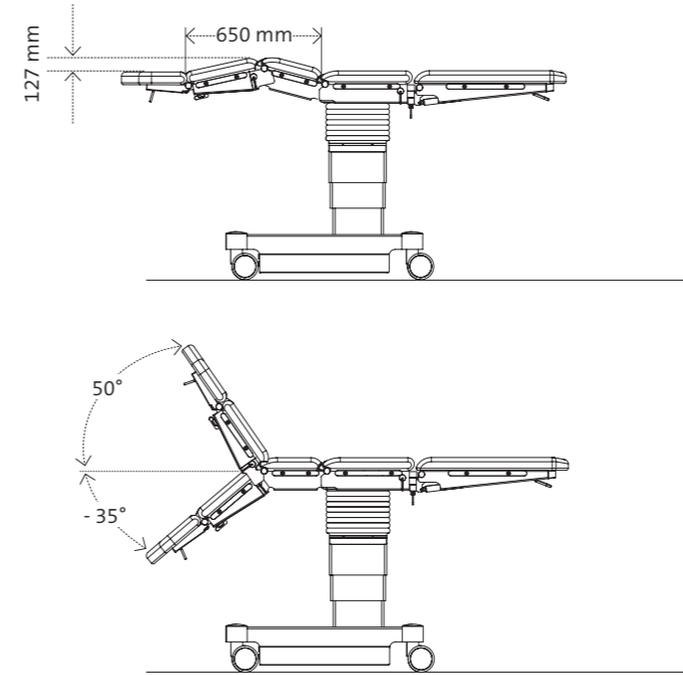


Plateau de table à translation
(seulement pour modèles 601120 et 601820)

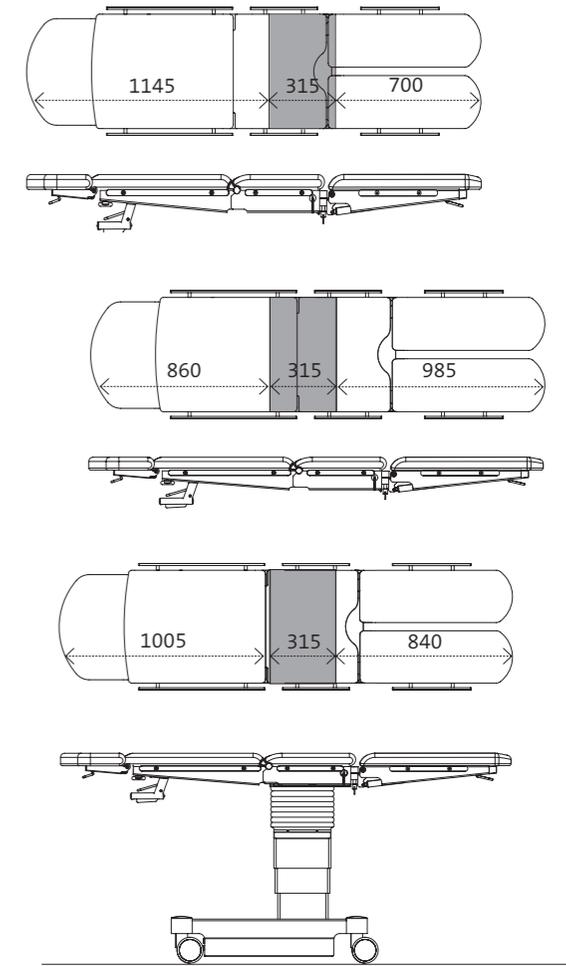

Plan au sol 601120

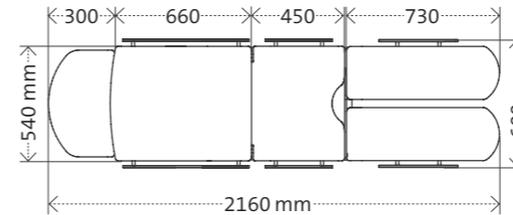

Plan au sol 601700 / 601820

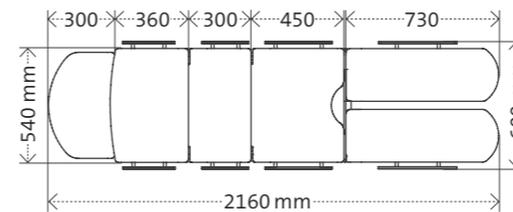

Accessoires pour medifa 6000



Repose-tête pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61144

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61144SF)



Repose-tête à double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61146

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61146SF)



Repose-tête petit pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61143

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 230 x 230 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61143SF)



Dossier supérieure pour modèles 601700 et 601820

Réf. 61250

- Adaptable au dossier inférieur
- Radiotransparent
- Rails EU intégrés
- L x l: 360 x 540 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61250SF)



Billot mécanique pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61655

- Réglable par manivelle
- Pas de montage ultérieur
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent



Dossier en trois parties pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61385

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- À monter sur la section pelvienne
- Réglage simple par vérin à gaz
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61385SF)

Accessoires pour medifa 6000



Dossier en trois parties pour modèles 601700 et modèle 601820

Réf. 61390

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- A monter sur la partie inférieure du dossier
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61390SF)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61125

- Rallonge de la section pelvienne de 430 mm
- Avec échancrure gynécologique
- L x l: 430 x 540 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61125SF)



Plaque jambière pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61625

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°
- Adaptable à la section pelvienne
- L x l: 670 x 540 mm
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61625SF)



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61615

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°
- A monter sur la section pelvienne
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61615SF)
- Paire



Plaques jambières divisées à double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61660

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°, rabattables
- A monter sur la section pelvienne
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Rails (UE) intégrés
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61660SF)
- Paire



Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61690

- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à la plaque de siège ou le dossier inférieur
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: Visco-élastique, H= 60 mm, amovible, antistatique

Accessoires pour medifa 6000



Plateau de jambes pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61635

- De transfert pour un soutien de courte durée des jambes
- A monter sur la section pelvienne
- L x l: 900 x 500 mm
- Matériel: Acier inoxydable



Plateau pour la chirurgie pédiatrique pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61633

- A monter sur la section pelvienne
- Matelas amovible
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 700 x 430 mm
- Matelas: Visco-élastique, H = 60 mm, antistatique, amovible



Elargisseur pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61355

- Eléments pour élargir le plateau
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 310 x 105 mm par segment
- Matelas: PUR, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent
- Disponible avec matelas visco-élastique en option, épaisseur 80 mm (Réf. 61355SF)
- Paire



Commande au pied pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble
- Pas de montage a posteriori



Télécommande manuelle infra rouge pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604070

- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec chargeur



Système de sécurité pour medifa 6000

Réf. 50655

- Assurant le fonctionnement de la table à tout moment (par ex. en cas d'une panne électronique ou d'une alimentation interrompue)
- Réglage de toutes fonctions électro-hydrauliques par pédale
- Pas de montage a posteriori

Accessoires pour medifa 6000



Vérin stabilisateur pour medifa 6000

Réf. 50650

- Assurant une stabilité optimale de la table
- Pas de montage a posteriori



Barre de stabilité transversale radiotransparente pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61670

- Remplace la barre métallique assurant une radiographie de la partie dorsale sans restrictions



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61640

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américaine)
- Matériel: Acier inoxydable



Set d'irrigation RTU pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61120

- Se composant d'un seau, une cuvette, crépine, tuyau et chariot en inox
- Fixation incluse
- L x B x H (Cuvette): 325 x 265 x 65 mm
- Volume (Seau): 15 Liter
- Matériel: Acier inoxydable



Coussin en mousse pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 5000SF

- Matelas optionnel (remplace le matelas vert)
- Pour des tables ayant un dossier en une partie
- H = 80 mm

Coussin en mousse pour modèles 601700 et 601820

Réf. 6000SF

Identique au modèle 5000SF, mais pour modèles 601700 et 601820

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (ref. 341045) en acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Vous trouverez d'autres accessoires dans notre brochure "Accessoires pour tables d'opération".



medifa

medifa
the medical factory

L'acteur mondial en matière de salle d'opération

medifa healthcare group rassemble sous un même toit toutes les compétences en matière de salle d'opération - 100 % made in Germany.

Avec sa gamme de produits et de prestations, le groupe couvre tous les besoins en matière de tables et d'accessoires d'opération, des tables d'examen au système de murs, de portes et de plafonds pour fournir une salle d'opération clé en main.

Ce groupe rassemble les fabricants de composants de table d'opération les plus importants du monde.


La planification, l'ingénierie et la fabrication sont entièrement effectuées en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus de 90 % rend le groupe pratiquement indépendant des fournisseurs tiers.

Dans ce groupe, nous retrouvons medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop (tables d'opération), medifa hygienic rooms GmbH à Ötigheim (systèmes d'aménagement modulaire) et medifa metall und medizintechnik GmbH (composants de table d'opération) à Rastatt.

Via un réseau de partenaires, medifa exporte dans plus de 80 pays à travers le monde.

Sites et pays d'exportation

- Systèmes de salles d'opération modulaires : Plafonds, portes, murs (RooSy)
- Tables d'opération mobiles et accessoires
- Tables d'examen et de traitement
- Solutions de construction spéciales

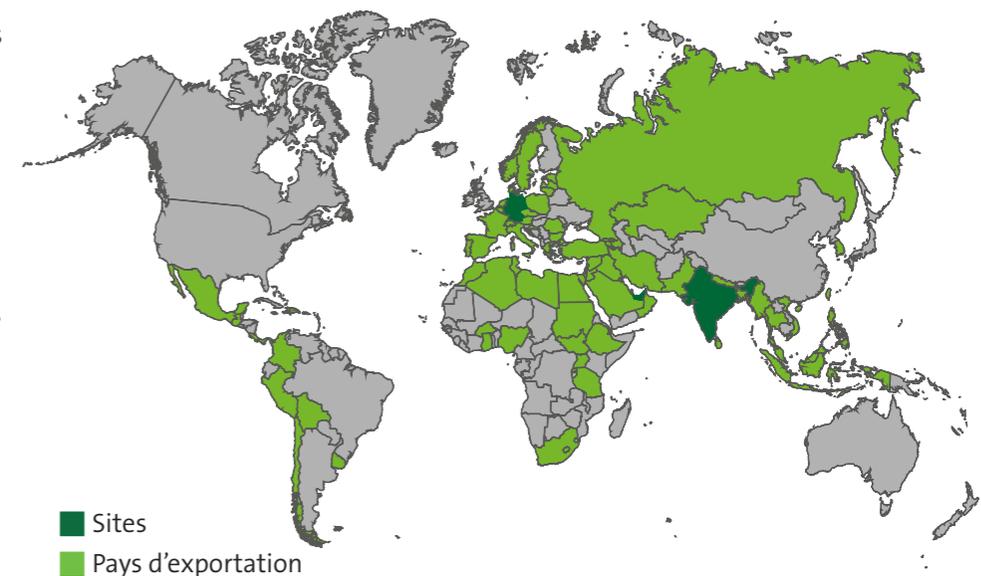

■ Sites
■ Pays d'exportation

we care.



SYSTEM MED

Parc Urbain Est
105, rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx en Velin
tel. 04 78 89 71 43
fax 04 78 89 65 40
info@system-med.fr



DIN EN ISO 13485:2012
DIN EN ISO 9001:2015

Version 02-18-FR
Sous réserves de modifications.

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group

medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -15
info@medifa.com

we care.