

PLATINE TRIPLE DÉPARTS
MACH LED


Une ergonomie puissance 4



La platine triple départ est une platine permettant de fixer des bras supplémentaires au moment de l'installation ou à posteriori, sur un ou deux fûts secondaires distincts du fût principal et plus hauts. L'ergonomie est améliorée en laissant plus de place libre sous le fût central pour le positionnement des coupes. Les bras supérieurs sont plus longs et permettent un déport maximal des accessoires (jusqu'à 2300mm).

Évolutivité et flexibilité

Invisibles quand ils sont inutilisés sous le cache plafond (plat ou bombé), les deux départs supplémentaires permettent l'ajout ultérieur d'un ou deux bras sans démontage ni gros travaux. L'ancrage reste le même et est compatible avec tous les plafonds, notamment soufflants.

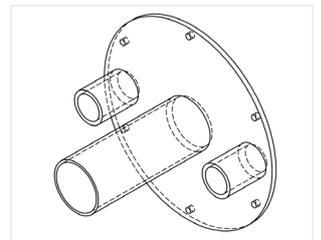

Esthétique et hygiène

L'arrière des supports moniteurs possède un carter permettant d'y loger l'alimentation du moniteur de manière esthétique et hygiénique. Les câbles d'alimentation et vidéo parcourent les bras et suspensions cardaniques par l'intérieur et sont donc invisibles, même en HD.

La fixation des moniteurs est particulièrement ergonomique, notamment pour les nouveaux formats 24" et 26", tout en laissant l'accès à la poignée stérile pour une manipulation facile.



Des possibilités multiples



Satellite LED supplémentaire



Éclairage d'appoint pour anesthésiste



Support caméra universel



Plateaux supports matériel



Support moniteur double



Bras fluide léger double

SYSTEM MED

Parc Urbain Est - 105, rue Alexandre DUMAS - 69120 Vaulx-en-Velin

Tél. +33(0)4 78 89 71 43

info@system-med.fr - www.system-med.fr